



ウィル  
WHILL 株式会社

【本社】  
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-1-11  
ハーバープレミアムビル 2F

【西日本オフィス】  
〒600-8815 京都市下京区中堂寺粟田町  
93 番地 京都リサーチパーク 6 号館 313 号室

TEL: 0800-080-4338

営業時間: 平日 9:00 ~ 18:00 ※通話料無料

[www.whill.inc](http://www.whill.inc)

Vol.1.0

折りたためるモビリティ  
WHILL Model F



WHILL



今日は WHILL でどこ行こう

折りたためるモビリティ、WHILL Model F



ウィル モデル エフ

WHILL Model F

※免許不要／歩道での走行可能

メーカー希望小売価格  
(非課税、送料調整費別)

273,000 円

介護保険適応なし



## こんなモビリティ、 待っていた

「今日はWHILLでどこ行こう」

軽くて、折りたためるWHILL Model Fが我が家に来てから  
私の行動範囲がぐんと広がっている。

行けなかった場所が、行きたい場所になっていく——

こんなモビリティ、待っていた。





# さあ、 毎日が動き出す

友人と久しぶりのランチへ行こう。

WHILL Model Fとなら

気づくとほら、心も体も軽くなっている。

楽しいことは、リタイアしないんだ。

さあ、もっとわくわくできる毎日が動き出す。





## 折りたためて玄関すっきり 収納できるモビリティ



## 帰宅後も、さっと折りたためます

3つの手順で折りたたむことができます。  
展開の手順もシンプルです。







## 持ち運べる「移動」

折りたためて軽量の WHILL Model Fだから、  
タクシーの後部座席への乗り入れや、自動車のトランクの車載も可能。  
新幹線や飛行機など様々な交通手段でご利用いただけます。









## もっとあなたと 旅に出たくなる

旅先にも使えるモビリティ。

長時間歩く方や、ご家族とペースを合わせて  
旅行を楽しみたい方に最適です。







## カラー バリエーション

洋服を変えるように、  
気分やシチュエーションに合わせて。  
5色のカラープレートを用意しました。  
ギフトにも最適です。



White ホワイト



Light Blue ライトブルー



Red レッド



Black ブラック



Light Green ライトグリーン



White



Light Blue





Red



WHILL



Black





Light Green





## 生活に 便利な機能

### 軽量、コンパクト、 折りたたみ

重量26.7kg(※バッテリー含む)で折りたたみ可能。3つの手順でさっと折りたたむことができます。



### 直感的な操作

片手で簡単に操作できるコントローラー。速度調整、電源オフ・オンも片手で。手を放すと自動でブレーキがかかります。コントローラーは、右利き、左利きに合わせて左右交換もできます。



### 小回り

半径78cmの小回りを実現。エレベーターの中でも一周をすることができます。





### 段差

3.5cmの段差を乗り越えることができます。



### アプリ


スマートフォン用の専用アプリをダウンロードできます。アプリで、電池の残量の確認や、遠隔でのロック、コントローラー操作が可能です。

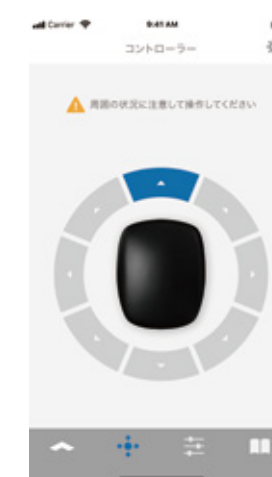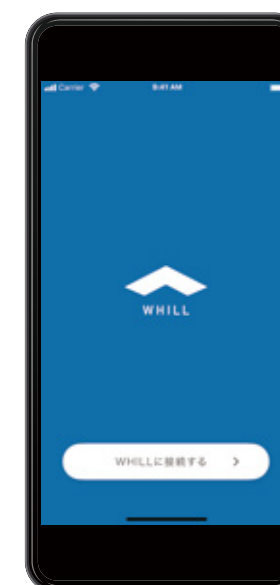

直感的なコントローラー画面で遠隔操作をすることができます。

### 充電

まるで電動アシスト自転車のように、家庭用コンセントで簡単に充電ができます。重量は2.7kg。5時間充電で20kmまで走れます。

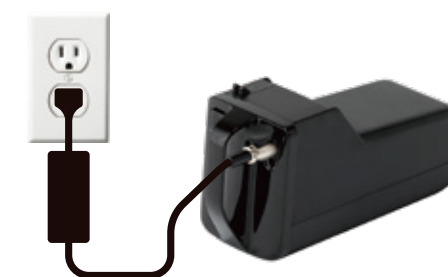

バッテリーは取り外して家庭用コンセントで充電可能。予備を搭載すれば、いつもの倍走れます。





# 「あったらいいな」を叶える アクセサリー（オプション品）



## スマートキー

¥8,690（税込）

本体の施錠・解錠が簡単にできます。盗難防止ができ安心です。



## バスケット

¥6,160（税込）

買い物のお荷物を入れることができるメッシュタイプ。お買い物や旅行の際に荷物を入れられます。



## 杖ホルダー

¥3,630（税込）

後部に杖をしっかりと取り付けることができる杖ホルダー。杖を使って外出される方に最適です。



骨盤ベルト  
座位を安定させます。  
¥6,380（税込）



カラープレート（予備）\*  
5色の中から追加で購入すれば、  
カラープレートの色を  
変えることができます。  
左右1組 ¥5,280（税込）




充電器（予備）\*  
職場・施設など、よく行く場所に  
もう1つ置くと安心です。  
¥9,801（税込）



ダストカバー  
WHILLを風・ホコリ  
などからまもります。  
¥7,480（税込）



ドリンクホルダー  
飲み物を気軽に持ち運べます。  
¥2,530（税込）

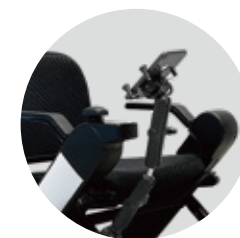

スマートフォンホルダー  
スマートフォンを  
取り付けられます。  
¥16,500（税込）



U字型の  
ジョイスティック  
指や手首を乗せて操作が可能です。  
¥14,850（税込）



ジョイスティック  
（スティック）  
手で掴んだり指の間に挟んで  
操作します。  
¥5,500（税込）



バッテリー（予備）\*  
2.7kgの軽量バッテリーは  
予備バッテリーとして使えます。  
¥71,500（税込）

\* 本体には一つ付属しています



コントローラー保護フィルム  
コントローラーへの傷付きを  
軽減します。  
¥2,750（税込）

商品の仕様および表示価格は、製品改良や材料高騰、その他の理由により予告なく変更することがあります。



WHILL アクセサリーの販売サイトをご用意しています。  
アクセサリーの追加購入にぜひご活用ください。



## 3人のSTORY 紹介



### Mariさん

WHILL Model Fに出会ってから、趣味であった生け花を再開したり、対面で会えていなかった友人とランチしたり、毎日が充実しています。趣味の教室の前に折りたたんでWHILLを置いたり、狭くて行きづらかったレストランにも行けるようになりました。

### Hiroshiさん

WHILL Model Fを利用するようになってから遠方の講演依頼なども引き受けられるようになり、ますます仕事に励めるようになりました。タクシー、新幹線、飛行機など様々な移動手段を使うのでWHILL Model Fは何にも代えられぬ必需品です。



### Kaoruさん

普段杖を利用していますが、たまにいく娘との旅行にWHILL Model Fは重宝しています。タクシーを使わずに、娘と一緒にペースで街や緑道を散策できるので、その街の空気を存分に楽しめるようになりました。また娘と行く次の旅の計画もたてています。







スペック一覧

|          |         |        |            |                          |
|----------|---------|--------|------------|--------------------------|
|          |         |        | アームフリップ    | なし                       |
| 重量       | バッテリー   | 2.7kg  | カラーバリエーション | 5色                       |
|          | バッテリーあり | 26.7kg | バッテリー      | 25.3V, 10.6Ah            |
| 段差乗り越え能力 | 3.5cm   |        | 充電器        | 100-240V                 |
| 耐荷重      | 115kg   |        | サイズ        | 折りたたみ 555**×465×855mm*** |
| 走行可能距離   | 20km    |        |            | 開いたとき 555**×935×802mm    |
| スピード     | 6km/h   |        | 充電時間       | 5時間                      |
| 登坂能力     | 10°*    |        | 介護保険適応     | なし                       |
| 回転半径     | 78cm    |        | 使用環境       | -15～40℃****              |

\* 急な坂道を走行すると減速度合が変わることがあります。  
\*\* 幅はフィッティングにより最大 605mm    \*\*\* 高さはフィッティングにより最大 907mm  
\*\*\*\* 低温 (0℃以下) の環境でバッテリーの温度が著しく低下すると減速します。その場合、平地での走行速度は最大でも時速 4km に制限されます。  
\*\*\*\* バッテリーおよび充電器は、充電指定温度である 0℃～40℃での保管を推奨します。





## 全国の販売店で販売しています

「WHILL 店舗検索」で検索ください。  
試乗できる店舗もございます。



CHECK!

## WHILL 公式 YouTube に 詳しい説明があります



CHECK!



### ライフスタイル動画

WHILL Model Fがあると  
どんなライフスタイルが送れるの？  
という方はこちらをご覧ください。



### 機能紹介動画

WHILL Model F って  
どんな機能があるの？  
という方はこちらをご覧ください。



### 操作ガイド動画

折りたたみ手順や、操作方法など実際にどうやってやるの？という方はこちらをご覧ください。



## 試乗会を全国で実施中です

「WHILL 試乗会」で検索ください。専門スタッフが丁寧にご説明します。



CHECK!



来場者に  
WHILL グッズが  
当たります



各種の冊子がございます



専門スタッフが丁寧にご説明します

機能の説明

運転方法

その他のご相談

様々な特典グッズがあります



# Q & A

よくあるご質問をまとめました。

## 他の乗り物との違いについて

### Q. 他の乗り物と比べて、何が違うの？

|        | 自動車         | 電動アシスト付き自転車       | シニアカー                 | WHILL            |                        |
|--------|-------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 運転免許   | 要           | 不要                | 不要                    | 不要               | 道路交通法上では歩行者扱い          |
| 走行場所   | 車道          | 車道                | 歩道                    | 歩道               | 自動車との接触事故のリスクが低く安全     |
| リスク    | 交通事故のリスクあり。 | 転倒リスクあり。バランス感覚が必要 | 重心が高いため坂道によっては転倒リスクあり | 重心が低いので転倒リスクは少ない | 転倒のリスクがないので安心です        |
| 車載     | -           | 不可                | 不可                    | 可                | 乗用車に乗せて外出可能です          |
| 屋内乗り込み | 不可          | 不可                | 不可<br>小回りが効かない        | 可<br>狭い店内でもスムーズ  | スーパー、電車やバスなどにもそのまま入れます |

## 走行について

### Q. 運転免許は必要ですか？

必要ありません。歩行者扱いですので、歩道だけでなくスーパーの中や、室内の移動でもご利用頂けます。

### Q. 走行する際はどこを走ればいいですか？（車道？歩道？）

歩道です。道路交通法では「歩行者扱い」になります。

### Q. スピードはどのくらいですか？

最速で時速6kmです。大人の早歩きぐらいですので、意外と早く感じられるかもしれません。

時速6kmが速いと感じる方には、速度調整ボタンで最高速度を制限することも可能です。

### Q. 何時間走れますか？

1回の満充電で20km走りますので、時速によりますが、時速4km（歩行速度）ですと約5時間走ることが可能です。テーマパークでもバッテリーが切れることなく、一日中乗ることも可能です。近所のスーパー往復や通院ぐらいであれば、2日～3日に1回充電するのみで問題ない方が多いです。

## 安全について

### Q. 雨の日に乗っても大丈夫ですか？

生活防水となっておりますが、電気製品のため、雨の中での積極的なご利用は控えてください。

## 公共交通機関の利用について

### Q. 電車を利用することが出来ますか？

基本的にご利用可能です。電車とホームの間が空いている場合があるので、駅係員の方に乗降のお手伝いをお伝えください。また駅構内でのエレベーターなどバリアフリーの設備も事前にご確認ください。

### Q. 飛行機に搭載可能でしょうか？

航空会社、お乗りになる航空機の機体によって異なるため、事前に航空会社に電動車椅子の輸送についてご確認ください。航空会社での手続きをスムーズにするために、航空会社向けの資料や証明書をホームページの「よくある質問」コーナーにご用意しておりますので、航空会社へのご連絡の際にご利用ください。

## スペックについて

### Q. 詳細のスペックはどうなっていますか？

P37をご覧ください。

### Q. 他のモデルとの違いは？

WHILL Model C2との違いは、折りたたみ機能の有無、重量、介護保険の適応状況などです。詳しくはWHILL公式HPをご覧ください。